



Polski

Rio FASS – Urządzenie do peelingu kawitacyjnego ULTRASONIC PEELER

Instrukcje dotyczące użycia

Pozwól, aby Twoja skóra była dogłębnie oczyszczona, odmłodzona, pełna blasku i świeżości. Teraz możesz z łatwością wykonać samodzielnie pełen zabieg peelingu kawitacyjnego do pielęgnacji przetruszcających się, jak i suchych sfer twarzy. Zabieg jest bardzo efektywny i na tyle delikatny, że może być wykonywany 2-3 razy w tygodniu. Regularne użycie pozwoli na likwidację pojawiających się drobnych zmarszczek oraz redukcję porów. Urządzenie do peelingu kawitacyjnego oczyszcza skórę twarzy z użyciem technologii ultradźwiękowej, pozwala na głębokie i wysoce efektywne złuszczenie martwego naskórka i odżywianie twarzy. Bezprzewodowa praca sprawia, że zabieg jest niezwykle łatwy i przyjemny.

Zakrzywioną łopatkę stosuję się z obu stron. Wybór strony zależy od tego czy chcemy głęboko oczyścić skórę, czy też zastosować masaż ultradźwiękowy wzmagający absorpcję serum kolagenowego do głębszych warstw skóry.

1. Peeling - zwilż skórę twarzy wodą i włącz urządzenie na programie fali ciągłej. Zakrzywioną stroną łopatki wykonaj zabieg peelingu zachowując kierunki zabiegu opisane w instrukcji obsługi. Skóra stanie się jedwabiście gładka już po pierwszym zabiegu.

2. Pielęgnacja - nałóż serum kolagenowe na twarz i włącz urządzenie na programie fali przerywanej zachowując kierunki zabiegu opisane w instrukcji obsługi. Przyłóż łopatkę urządzenia płasko do skóry i wykonaj zabieg sonoforezy. Skóra jest odżywiona i pełna blasku.

Informacje podstawowe:

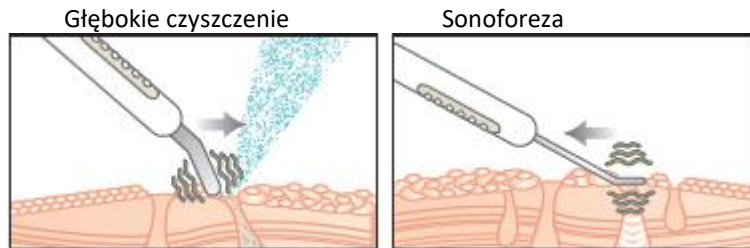
- urządzenie do peelingu kawitacyjnego
- delikatny zabieg, który można wykonać samodzielnie - łatwa i bezpieczna obsługa - końcówka w formie łopatki 2 w 1 - 2 programy:
 - Program 1. Fala ciągła (służy do głębokiego oczyszczania)
 - Program 2. Fala pulsująca (służy do sonoforezy)
- kontrolki fali ciągłej i pulsującej
- możliwość regulacji poziomów mocy
- kontrolki wysokiej i niskiej intensywności
- zasilanie: akumulatorowe (akumulator litowo-jonowy; 3,7V/900mA)
- w zestawie:

OSTRZEŻENIE


- Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące korzystania z tego instrumentu i zachować je do wykorzystania w przyszłości.
- Produkt może być stosowany przez dzieci w wieku 8 lat i starszych oraz osób o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub otrzymali instrukcje dotyczące używania produktu w sposób bezpieczny i rozumie ryzyko.
- Nie stosować na blizny, uszkodzenia ciągłości skóry, trądzik różowaty podczas choroby, kiedy pustulárním lub stan zapalny trądzik, uszkodzonej skóry, egzema, zapalenie skóry lub chore, lub jakiegokolwiek inne choroby skóry. Jeśli nie jesteś pewien, zalecamy, aby skonsultować się z lekarzem.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

ZAPRASZAMY

ULTRASONIC FACIAL™ łączy w sobie dwa zabiegi kosmetyczne twarzy. Jest on stosowany bezpośrednio na wilgotną skórę, delikatny zabieg głęboko oczyszcza drobnych drgań ultradźwiękowych, które pomagają usunąć martwe komórki naskórka, brudu i łoję. Skóra jest gładza i bardziej miękka od razu. Drugi tryb wykorzystuje technikę salonach kosmetycznych - sonoforezę częstotliwości, co zwiększa skuteczność substancji czynnych zawartych w nawilżających kremów, serum i preparatów przeciw starzeniu się skóry.



OPIS URZĄDZENIA

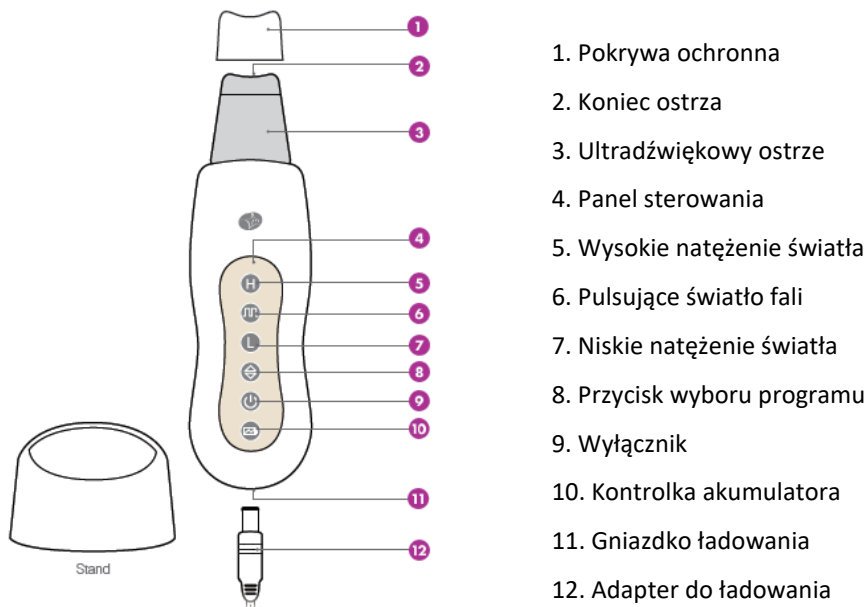





ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie podczas ładowania czerwona lampka gaśnie. To może trwać do 8 godzin w zależności od naładowania akumulatora.




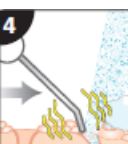
Jeśli akumulator jest rozładowany, urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy 6 razy, a następnie wyłączy się automatycznie.

| | |
|--|---|
| | Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego i podłączyć do sieci. |
| | Na ładowarce świeci się na czerwono. |
| | Gdy urządzenie jest w pełni naładowany, wskaźnik baterii gaśnie i produkt jest gotowy do użycia. Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od urządzenia i odłącz go. |

WYBÓR PROGRAMU


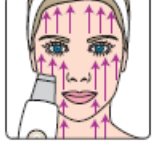

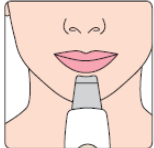
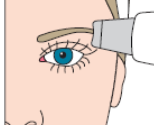
| | |
|---|---|
|  | <p>Włącz urządzenie przez naciśnięcie przełącznika.</p> |
|  | <p>Program niskiego natężenia impulsów Po włączeniu automatycznego wyboru programu impulsów o niskiej intensywności. Zalecamy zachęcającego programu leczenia przy niskich impulsów intensywności.</p> |
|  | <p>Naciśnij dwukrotnie przycisk, aby wybrać opcję programu impulsów wysokiej intensywności.</p> |
|  | <p>Program wysokiej intensywności impulsów Po wybraniu tego programu, lampka świeci na niebiesko.</p> |

GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE SKÓRY





| | |
|---|--|
|  | <p>1 Zastosuj ciepłą wodę na swojej twarzy. Uwaga: W celu uzyskania najlepszych rezultatów stosować po kąpeli lub prysznica. Zaleca się 1-2 zabiegi w tygodniu.</p> |
|  | <p>2 Włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Wybierz program z impulsów wysokiej lub niskiej intensywności.</p> |
|  | <p>3 Zanurzyć wacik wodą i trzymać urządzenie tak, że centrala jest z dala od twarzy. Przenieś mokrą watę przed ostrzem w tym samym kierunku, utrzymać skórę i utrzymać światło średnim kontakcie ze skórą. Widać mgiełkę wody, kurzu i brudu są zeskrobuje przednią krawędź ostrza.</p> |
|  | <p>4 Po użyciu urządzenie wyłączyć, naciskając przycisk zasilania. Ostrze można wycierać wilgotną szmatką. Przechowywać razem z tuleją ochronną na łopatki. Uwaga: W przypadku opuszczenia jednostki leżeć na, urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach.</p> |

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EFEKTYWNEGO CZYSZCZENIA




Zaleca się stosowanie metod wymienionych poniżej, ponieważ wspierają one naturalny drenaż limfatyczny. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać krótkich nakładających uderzeń.

| | |
|--|--|
|  | <p>Przesunąć urządzenie z szyjką do góry, na powierzchni w kierunku pionowym, poprzez pociągnięcie obu stronach powierzchni. Systematyczne przeglądanie wszystkich obszarach powierzchni, jak pokazano na fig.</p> |
|  | <p>Zmień kierunek sprzętu roboczego i pójść w odcinkach pionowych kresek / z okolic szyi, praca od szczęki do części włosów.</p> |
|  | <p>Czyszczenie po krzywej nozdrza przeprowadzono z zakrzywienia łopatki.</p> |
|  | <p>Użyj zwiótczenie środkową część łopatki do czyszczenia podbródek pod dolną wargę w dół pionowych kresek.</p> |
|  | <p>Wybierz ustawienia niskiej intensywności dla obszaru brwi. Podczas głębokiego czyszczenia należy unikać delikatną skórę pod okolicach oczu.</p> |

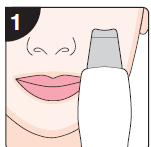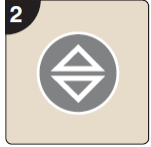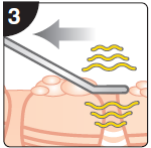
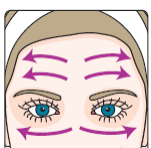
PROGRAMY SONOFOREZĘ

| | |
|---|--|
|  | <p>Leczenie sonoforeza pomocą fal pulsujących do efektywnej absorpcji nawilżające lub krem odżywczy. Zalecamy, aby najpierw przeprowadzić głębokie oczyszczenie. Włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania.</p> |
|  | <p>Naciśnij jeden przycisk wyboru programu wybór programu o niskiej intensywności lub 3x programu wysokich impulsów intensywności.</p> |
|  | <p>Niskie natężenie impulsów Po wybraniu tej opcji, program ten, usłyszysz sporadyczne wibracje dźwiękowe, niebieskie światło o niskiej intensywności i pulsująca fala zacznie migać.</p> |
|  | <p>Impulsy o wysokiej intensywności Po wybraniu tej opcji, program ten, usłyszysz sporadyczne wibracje dźwiękowe, zapala się światło niebieskie i wysokiej intensywności pulsująca fala zacznie migać.</p> |

LECZENIE SONOFOREZĄ

| | |
|--|---|
|  <p>1</p> | <p>Nałożyć balsam lub surowicy anti-starzenia się skóry do wyboru. Trzymaj urządzenie tak, że ostrze dotyka płaskiej części skóry.</p> |
|  <p>2</p> | <p>Włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Wybierz program impulsów wysokiej lub niskiej intensywności. Zaleca się rozpocząć program niskiej intensywności.</p> |
|  <p>3</p> | <p>Pod niewielkim ostrza prowadzącego ciśnienia na powierzchnię skóry przy użyciu odwrotnej ruch. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie spiesz się i pracować powoli, pokrywać całą powierzchnię twarzy. Po użyciu urządzenie wyłączyć, naciskając przycisk zasilania. Uwaga: Jeśli urządzenie jest wyłączone, urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach.</p> |

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

| | |
|---|---|
|  | <p>Rozpoczyna się na szyi, pod niewielkim ciśnieniem, przesuwając ostrze wzdłuż powierzchni skóry. Przy odwrotnym ruchu z pracy twarzą na zewnątrz.</p> |
|  | <p>Kontynuuj do twarzy w szczękę do włosów. Schodzenia po twarzy, aż do całkowitego wchłonięcia produktu.</p> |

WAŻNE INFORMACJE

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Ten produkt nie jest wodoodporny, więc nie należy umieszczać go w miejscu, gdzie może spaść lub zostać pociągnięty do wody.
- Urządzenie można czyścić przecierając wilgotną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów.
- Ostrze można wycierać z gorącą wodą. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie używaj tego produktu, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli upuszczony lub uszkodzona.
- Brak części obsługiwanych przez użytkownika wewnątrz urządzenia.
- Niewłaściwe użycie produktu może spowodować uszkodzenie.

LIKWIDACJA

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2002/96 / WE) ma zastosowanie do recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych technik, aby zminimalizować wpływ na środowisko, usuwanie niebezpiecznych substancji i zapobieganie zwiększa odpadów.
Produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, więc upewnij się, że pod koniec jego życia we właściwy sposób odpowiedniej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi



SPECYFIKACJA

Adapter do ładowania:

Wejście: 100V-240V

50 Hz

Wyjście: 6V

DC 1.0A

Jednostka:

Wyjście: 25 kHz

Bateria: 3.7V / 950mAh



Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami, a następnie zapisywać je do wykorzystania w przyszłości.



Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową.



Produkt ten nie nadaje się do ładowania w łazience.



Ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Ten produkt jest kompatybilny z istniejącym prawodawstwem UE odnoszącym się do produktów.



Gniazdo wejściowe biegun dodatni.