

Fairywill

**Podróżna szczoteczka soniczna
do zębów z zestawem końcówek
FairyWill FWT9**


Instrukcja obsługi

**Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed
użyciem produktu, a także o zachowanie instrukcji obsługi
w celu wykorzystania w przyszłości.**

1. Funkcje produktu

- Szczoteczka posiada wodoodporną oraz antypoślizgową konstrukcję.
- Szczoteczka posiada wymienne końcówki.
- Szczoteczka generuje wysokie wibracje, które pozwalają na dokładne umycie zębów.
- Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski, wskaźnik ładowania szczoteczki zacznie migać.
- Ładowanie urządzenia jest możliwe poprzez port USB.
- Szczoteczka co 30 s przypomina o zmianie miejsca czyszczenia.
- Szczoteczka posiada 3 tryby: Clean, Soft oraz Massage. Po włączeniu szczoteczki uruchamia się ostatnio używany tryb.

2. Opis produktu

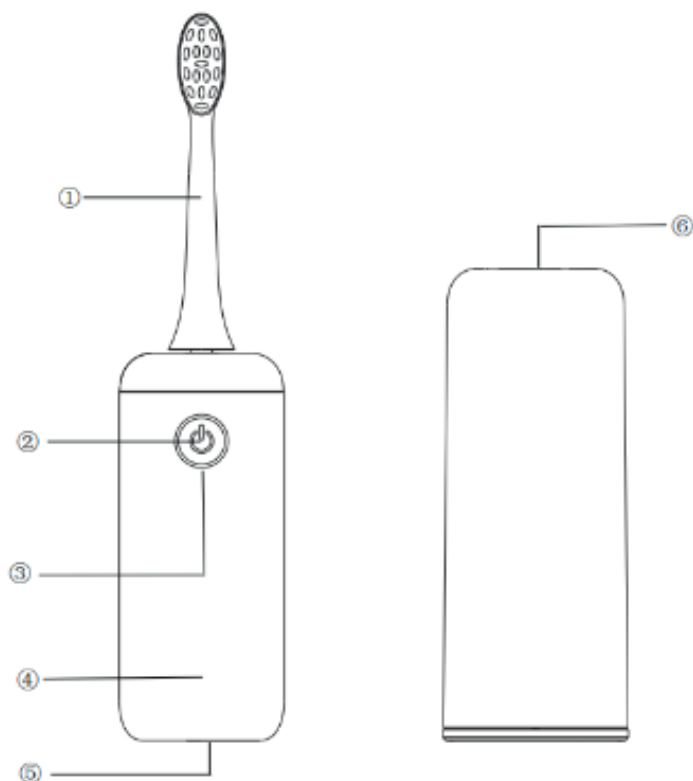

1. Głowica szczotki
2. Przycisk zasilania / trybu pracy
3. Wskaźnik trybu / ładowania
4. Uchwyt
5. Port ładowania
6. Nakładka szczoteczki

3. Prawidłowa obsługa produktu

Użytkowanie

1. Nałóż końcówkę na szczoteczkę i odpowiednio ją zamocuj, aby nie wypadła.
2. Włącz szczoteczkę, naciskając przycisk zasilania.
3. Wybierz preferowany tryb (Clean, Soft lub Massage) naciskając przycisk zasilania.
4. Opłucz końcówkę i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
5. Umieść końcówkę szczoteczki z pastą przy zębach pod lekkim kątem w kierunku linii dziąseł.
6. Powoli przesuwaj końcówkę szczoteczki po zębach z minimalnym naciskiem. Nie dociskaj zbyt mocno końcówki do zębów i dziąseł oraz nie utrzymuj jej w jednym obszarze jamy ustnej przez dłuższy czas.
7. Szczoteczka posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 2 minutach. Jest to zalecany przez dentystów optymalny czas mycia zębów. Po każdym 30 sekundach występuje przerwa przypominająca o konieczności przejścia do innego obszaru jamy ustnej.
8. Zmień obszar czyszczenia po 30 sekundach. Szczoteczka automatycznie wyłączy się po 2 minutach.
9. Aby uniknąć rozpryskiwania pasty do zębów, włącz szczoteczkę dopiero po przyłożeniu jej do zębów i wyjmij ją z ust dopiero po jej wyłączeniu.

Wymiana końcówki szczoteczki

Montaż: wsuń końcówkę szczoteczki w kierunku uchwytu i upewnij się, że jest odpowiednio zamocowana.

Demontaż: przytrzymaj obudowę szczoteczki, a następnie wyciągnij końcówkę.

Ładowanie produktu

1. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że szczoteczka jest w pełni naładowana.
2. Jeśli szczoteczka nie jest używana przez ponad 3 miesiące, przed kolejnym użyciem należy ją w pełni naładować zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Jeśli wskaźnik ładowania szybko miga podczas działania szczoteczki, oznacza to, że poziom akumulatora jest niski. Naładuj szczoteczkę.
4. Aby naładować szczoteczkę, podłącz kabel USB do portu ładowania w dolnej części szczoteczki. Upewnij się, że szczoteczka jest bezpiecznie podłączona do prądu.
5. Wskaźnik ładowania będzie świecił na biało i migał powoli podczas ładowania. Kiedy akumulator zostanie w pełni naładowany, wskaźnik będzie świecił się przez dwie minuty, a po 2 minutach wyłączy się automatycznie. Po pełnym naładowaniu szczoteczki można używać jej przez dwie minuty każdorazowo, dwa razy dziennie przez 20 dni.
6. Szczoteczka posiada stopień wodoodporności IPX7, dzięki czemu można ją bezpiecznie używać w łazience.

Opis trybów

Pierwszy tryb: Clean

W tym trybie wskaźnik ładowania szybko miga. Obroty szczoteczki są duże, a natężenie wibracji najsilniejsze. Tryb jest odpowiedni dla prawidłowych stanów jamy ustnej, aby uzyskać najsilniejszy efekt czyszczenia i utrzymać zdrową higienę.

Drugi tryb: Soft

W tym trybie wskaźnik ładowania miga powoli, obroty szczoteczki są małe, a wibracje są najłagodniejsze z trzech trybów. Tryb jest odpowiedni dla użytkowników o wrażliwych zębach.

Trzeci tryb: Massage

W tym trybie wskaźnik ładowania na przemian miga szybko i wolno. Szybko zmieniają się obroty szczoteczki i natężenie wibracji. Tryb jest stosowany w celu utrzymania zdrowych dziąseł.

4. Specyfikacja

Temperatura robocza: 0-50°C

Napięcie robocze: DC 3,7 V

Materiał: Nylon

Napięcie wejściowe: DC 5.0 V

Moc znamionowa: 2 W

Czas ładowania: ok. 2 godziny

Stopień wodoodporności: IPX7

5. Środki ostrożności

1. Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktu bez upoważnienia.
2. Osoby, u których występują choroby jamy ustnej oraz osoby po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej, przed użyciem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
3. Dzieci oraz osoby niezdolne do obsługi urządzenia powinny być nadzorowane przez rodzica lub osobę dorosłą.
4. Nie należy zanurzać produktu w wodzie przez wydłużony czas.
5. Nie należy umieszczać szczoteczki w warunkach wysokiej temperatury ani wystawiać jej na działanie promieni słonecznych.
6. Nie należy mocno dociskać końcówki do zębów lub dziąseł.
7. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia.
8. Należy utrzymywać końcówki szczoteczki w pomieszczeniu z wentylacją i suchym powietrzem oraz unikać przechowywania szczoteczki w uchwycie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona przenoszona wewnątrz torby lub bagażu.

6. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Natężenie wibracji jest coraz słabsze.	<ol style="list-style-type: none">1. Końcówka jest zbyt mocno dociskana do zębów.2. Końcówka szczoteczki jest zamontowana nieprawidłowo.	<ol style="list-style-type: none">1. Przyłóż delikatnie końcówkę szczoteczki do zębów.2. Wyciągnij końcówkę szczoteczki z uchwytu i ponownie ją zamontuj.
Naładowana szczoteczka działa wyjątkowo krótko.	Akumulator szczoteczki zmniejszył swoją wydajność.	<ol style="list-style-type: none">1. Naładuj urządzenie ponownie.2. Szczoteczka nie była użytkowana, naładuj ją ponownie.3. Akumulator szczoteczki zakończył swoją żywotność, skontaktuj się z obsługą serwisową w celu wymiany lub naprawy.
Szczoteczka nie działa.	<ol style="list-style-type: none">1. Szczoteczka nie jest odpowiednio zasilania.2. Szczoteczka jest uszkodzona.	<ol style="list-style-type: none">1. Włóż przewód USB do portu ładowania w dolnej części szczoteczki do zębów i upewnij się, że szczoteczka jest bezpiecznie podłączona do prądu, a wskaźnik ładowania się świeci.2. Skontaktuj się z obsługą serwisową w celu naprawy.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta lub z obsługą serwisową w celu uzyskania pomocy.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.