

Bezprzewodowy przenośny irygator wodny SHONA S200 PRO



Przed użyciem prosimy upewnić się, że niniejsza instrukcja została dokładnie przeczytana, a jej treść w pełni zrozumiana.
Ponadto prosimy niniejszy dokument pozostawić do wykorzystania w przyszłości.

SPIS TREŚCI

Ważne środki bezpieczeństwa	2
Parametry produktu	4
Opis produktu	5
Ładowanie	6
Metoda użytkowania	7
Czyszczenie i pielęgnacja	9
Rozwiązywanie problemów	10
Deklaracja dotycząca substancji niebezpiecznych	11
Gwarancja	12

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności podczas korzystania z produktów elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy:

- Zawsze odłączać produkt od zasilania po użyciu.
- Unikać obsługi wtyczki mokrymi rękami.
- Unikać wkładania oraz upuszczania przedmiotu do wody lub innej cieczy.
- Unikać korzystania z produktu podczas kąpieli.
- Unikać umieszczania oraz przechowywania produktu w miejscu, z którego mogłoby spaść lub zostać ściągnięte do wanny lub zlewu.
- Unikać sięgania po produkt, który wpadł do wody. W takim przypadku natychmiast odłączyć produkt od zasilania.
- Sprawdzić przewód zasilający pod kątem uszkodzeń przed pierwszym użyciem oraz w okresie eksploatacji produktu.

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, obrażeń, porażen prądem i zaistnienia pożaru:

- Nie należy podłączać tego urządzenia do źródła napięcia, które różni się od tego określonego na urządzeniu.
- Gwarancja zostanie unieważniona jeśli produkt zostanie otwarty/zdemontowany z jakiegokolwiek powodu.
- Nie używać produktu, jeśli ma on uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie działa prawidłowo albo jeśli został upuszczony, uszkodzony lub wrzucony do wody. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem lub lokalnym dystrybutorem.
- Nie należy kierować wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych miejsc. Produkt jest w stanie wytworzyć ciśnienie mogące spowodować poważne uszkodzenia tych miejsc.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób wskazany w niniejszej instrukcji lub zgodnie z zaleceniami dentysty.
- Należy używać wyłącznie końcówek i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Do otworów lub węży nie należy upuszczać ani wkładać żadnych obcych przedmiotów.
- Przewód elektryczny należy trzymać z dala od nagranych powierzchni.
- Nie używać produktu na zewnątrz lub w miejscach, gdzie może on wejść w kontakt z produktami w aerozolu lub podającymi tlen.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie stosować w tym produkcie jodyny, soli fizjologicznej (roztworu soli) lub nierozpuszczalnych w wodzie skoncentrowanych olejków eterycznych. Użycie ich może zmniejszyć wydajność produktu i skrócić jego żywotność. Użycie takich produktów może spowodować utratę gwarancji. Do użytku wyłącznie z czystą wodą.
- Przed użyciem tego produktu należy usunąć z jamy ustnej wszelką biżuterię.
- Nie używać produktu mając otwartą ranę na języku lub w ustach.
- Jeśli lekarz lub kardiolog zalecił przyjmowanie antybiotyków przed zabiegami stomatologicznymi, należy skonsultować się z dentystą przed użyciem produktu lub jakiegokolwiek innego środka do higieny jamy ustnej.
- Nie należy używać tego produktu dłużej niż 5 minut i z przerwami dwugodzinnymi.


UWAGA:

- Należy ściśle poinstruować i nadzorować dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o specjalnych potrzebach w zakresie prawidłowego użytkowania produktu. Produkt nie jest wskazany dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić, że nie będą bawić się urządzeniem.
- W urządzeniu nie ma części nadających się do obsługi przez konsumenta; nie wymaga ono także konserwacji.
- Zbiornik urządzenia należy napełniać wyłącznie ciepłą wodą lub innym roztworem zalecanym przez lekarza stomatologa.
- * Dla ułatwienia i zrozumienia działania irygatora, czyszczenie szczelin między zębami za jego użyciem, w dalszej części instrukcji nazwaliśmy nitkowaniem.

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa produktu	Irygator wodny SHONA S200
Rozmiar produktu	66 x 49,5 x 166 mm (nie wliczając wysokości dyszy)
Pojemność zbiornika	200 ml
Ciśnienie wody	Okolo 60~130 psi
Częstotliwość	1400-1800 razy/min
Średnica dyszy	0,06 mm
Tryb nitkowania	Standardowy (punktowy), delikatny, mocny, impulsowy
Moc znamionowa na wejściu	5 V 1 A
Moc znamionowa	5 W
Pojemność baterii	1000 mAh
Port ładowania	Przewód ładujący typu C
Wodoodporność	IPX7
Czas działania	Okolo 30 dni (1 minuta dziennie w trybie Strong)
Akcesoria	Urządzenie * 1 szt. Dysza * 4 szt. Instrukcja obsługi * 1 szt. Przewód ładujący typu C * 1 szt. Pokrowiec *1 szt.

OPIS PRODUKTU

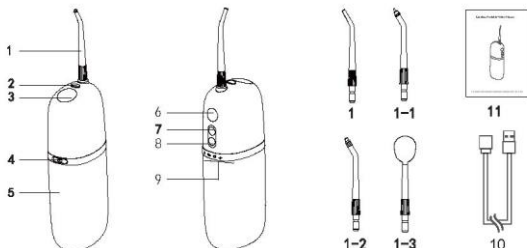

Nr.	Opis	Funkcja
1	Dysza standardowa	Do użytku blisko szczeliny między zębami, odpowiednia do codziennego użytku.
1-1	Dysza do kieszonek przyzębnych	Do użytku blisko szczeliny między zębami, odpowiednia dla osób z wrażliwymi dziąsłami.
1-2	Dysza ortodontyczna	Może zmieścić się w szczeliny międzyzębowej celem wyczyszczenia aparatu ortodontycznego, odpowiednia do celów ortodontycznych.
1-3	Dysza do czyszczenia języka	Skutecznie usuwa „meszek” z języka celem zahamowania przedostawania się bakterii do organizmu.
2	Przycisk zwalnający dyszę	Ułatwia uwalnianie i zatrzymywanie działania dyszy naciśnięciem przycisku.
3	Miejsce na przechowywanie dyszy w zbiorniku	Pozwala odłożyć dyszę z powrotem do uchwytu.
4	Port ładowania typu C	Umożliwia podłączenie urządzenia do ładowania.
5	Zbiornik	Do przechowywania płynów.
6	Przycisk zasilania/wyplukiwania	Uruchomienie lub wyłączenie strumienia wody.
7	Przycisk regulacji ciśnienia	Regulacja strumienia płynu: niebieski – słaby, biały – średni, pomarańczowy – mocny.
8	Przycisk trybu pracy	Regulacja punktu natrysku, miękki, silny, pulsacyjny.
9	Wskaźnik trybu	Pozwala wybrać tryb określany przez wskaźnik.
10	Przewód ładujący typu C	Umożliwia podłączenie produktu i zasilacza do źródła ładowania.
11	Podręcznik użytkownika	Instrukcja obsługi produktu dla użytkowników.

ŁADOWANIE

Ładowanie irygatora:

Podłączyć ładowarkę typu C do portu ładowania, a złącze USB do zasilacza z wyjściem 5 V (brak w zestawie).

Sugerowany czas ładowania to ponad 3 godziny, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

- (1) Urządzenie będzie użytkowane po raz pierwszy.
- (2) Urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy czas (3 miesiące lub dłużej).
- (3) Urządzenie jest słabo zasilane lub przestaje działać podczas użytkowania.







- O niskim poziomie baterii świadczy migająca dioda w kolorze pomarańczowym sygnalizująca zasilanie.
- Nie należy moczyć złączy przewodu ładującego typu C w żadnym płynie.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnić się, że oba złącza przewodu ładującego typu C są suche.
- Podłączyć przewód ładujący typu C do portu ładowania irygatora, a złącze USB do zasilacza 5 V (adaptera telefonicznego lub portu USB w komputerze).
- Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy kontrolka zasilania świeci światłem stałym.
- W pełni naładowany irygator może być używany przez 50 minut.
- Po długotrwałym użytkowaniu żywotność baterii może zostać skrócona.

Uwaga:

- Metalowe przedmioty, takie jak monety lub spinacze, należy trzymać z dala od przewodu USB podczas procesu ładowania, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia.
- Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest zjawiskiem normalnym. Jeśli po naładowaniu bateria nadal nie trzyma długo energii, może to oznaczać koniec jej żywotności. Należy wtedy oddać urządzenie do recyklingu w najbliższym przeznaczonym do tego celu centrum, zgodnie z lokalnymi wymogami. Bateria nie jest wymienna.
- Urządzenia należy używać w temperaturze pomiędzy 0~35°C.

METODA UŻYCIA





Należy pamiętać, że przed pierwszym użyciem należy wyłączyć urządzenie i ładować je przez 3 godziny.

1. Włożyć dyszę do środka pokrętła w górnej części uchwytu urządzenia.
Prawidłowe zablokowanie dyszy potwierdza „kliknięcie” (sugerowany czas wymiany dyszy: co 3 miesiące dla lepszych wyników. Jeśli dysza pozostaje luźna lub blokuje się przez ciała obce, należy ją wymienić).
2. Przed napełnieniem zbiornika i użytkowaniem produktu odłączyć przewód ładowania od urządzenia. Podnieść kłapkę zbiornika na wodę lub wyjąć go i napełnić letnią wodą.
3. Zamknąć pokrywę dyszy zbierającej lub obrócić i zablokować zbiornik wody, aby zapobiec jego przepełnieniu.
4. Tryb nitkowania przełącza się krótkim naciśnięciem przycisku trybu „”.
Uwaga: Dzięki funkcji zapamiętania urządzenie zachowa ten tryb z ostatniego użytkownika do następnego użycia.
 - Standardowy tryb spryskiwania: Przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje spryskanie celu wodą, następnie po 1 sekundzie nastąpi nitkowanie; i zwolnienie przycisku zatrzymuje spryskiwanie wodą.
 -  Tryb miękki: Dla użytkowników nowych lub posiadających wrażliwe zęby.
 -  Tryb silny: Dla większości osób do normalnego czyszczenia zębów.
 -  Tryb pulsacyjny: Tryb mocny i miękki naprzemiennie, pozwala na głębokie czyszczenie i masowanie dziąseł.
 -  Kontrola ciśnienia: Regulacja ciśnienia wody. Niebieskie światło oznacza tryb miękki, białe – średni a pomarańczowe – mocny.
5. Aby przełączyć intensywność strumienia wody, należy krótko nacisnąć przycisk kontroli ciśnienia „”.
6. Należy zapewnić, aby dysza była utrzymywana równolegle względem zębów i dziąseł. Strumień należy skierować do linii dziąseł pod kątem 90 stopni. Aby uniknąć rozpryskiwania cieczy, lekko zacisnąć usta, ale pozwolić wodzie wpływać do umywalki.
7. Aby rozpocząć nitkowanie z białym oświetleniem, należy krótko nacisnąć przycisk zasilania/ nitkowania. Podczas pracy urządzenia można dowolnie przełączać biegi i tryby pracy. Najdłuższy czas nitkowania to 90 sekund, po upływie ustalonego czasu, urządzenie wyłącza się automatycznie.
8. Skierować końcówkę w stronę zębów, przesunąć ją wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na krótko pomiędzy zębami. Kontynuować proces aż do wyczyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej strony górnych i dolnych zębów.

METODA UŻYCIA

Uwaga:

Urządzenie można włączyć za pomocą przycisku zasilania/trybu nitkowania/kontroli ciśnienia. Tryb i ciśnienie wody do czyszczenia można ustalać dowolnie. Po tym można rozpocząć proces nitkowania poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/nitkowania. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 sekundach, jeżeli nie wykona żadnej operacji.

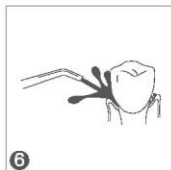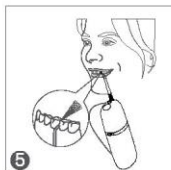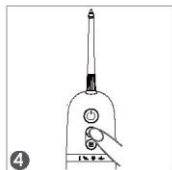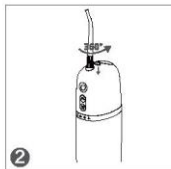


CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

Nie używać żadnych żrących lub ściernych detergentów, ponieważ uszkodzą one urządzenie.

Czyszczenie

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający dyszę, aby ją wyjąć, a następnie przepłukać wodą. Urządzenie należy każdorazowo czyścić po jego użyciu.
2. Zbiornik na wodę może zostać odłączony celem wyczyszczenia go miękką szmatką po wewnętrznej i zewnętrznej stronie.

* Planując odstawić użytkowanie urządzenia na dłuższy czas, wyczyścić go jak opisani wyżej i przechowywać w suchym miejscu.

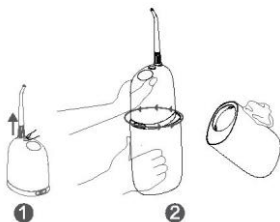

Pielęgnacja i utylizacja baterii

1. Po zakończeniu eksploatacji baterii, oddać ją do najbliższego centrum recyklingu zgodnie z lokalnymi lub stanowymi wymogami. Jeśli wyjęcie baterii jest niemożliwe, zanieść całe urządzenie do określonego centrum recyklingu.
2. Nie zaleca się wyjmowania baterii na własną rękę. Może wtedy dojść do uszkodzenia urządzenia na skutek użycia zbyt dużej siły; należy działać ostrożnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	(a) Nowe, kupione niedawno. (b) Przechowywane przez ponad 3 miesiące.	(a) Ładować urządzenie przez 3 godziny. (b) Skontaktować się z serwisem.
Urządzenie działa jedynie przez kilka minut po naładowaniu.	(a) Brak pełnego naładowania, słaba bateria. (b) Bateria na końcu okresu użytkowania.	(a) Ładować urządzenie przez 3 godziny. (b) Skontaktować się z serwisem.
Ciśnienie wody zbyt niskie.	(a) Dysza jest zablokowana. (b) Dysza jest zdeformowana. (c) Pompa jest zablokowana.	(a) Wymienić dyszę. (b) Skontaktować się z serwisem.
Urządzenie nie czyści.	(a) W zbiorniku nie ma wody. (b) Podczas używania nie zastosowano prawidłowego kąta. (c) Przewód wodny nie jest dobrze zamontowany. (d) Pompa jest zablokowana.	(a) Napelnić zbiornik wodą. (b) Skierować dyszę pod kątem 90 stopni do linii dźwięku. (c) Porządnie zamontować dyszę wodną. (d) Skontaktować się z serwisem.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Substancje niebezpieczne w tym produkcie, sklasyfikowane według składników, zostały zadeklarowane poniżej:

Deklaracja Dot. Substancji Niebezpiecznych

Substancje niebezpieczne Nazwa części	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
Plastikowa obudowa	O	O	O	O	O	O
Metal	O	O	O	O	O	O
PCB	X	O	O	O	O	O
Komponenty silnika	O	O	O	O	O	O
Bateria	O	O	O	O	O	O
Przewód ładujący	O	O	O	O	O	O

UWAGA:

O: Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach komponentu jest poniżej wymogu granicznego określonego w dokumencie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym jednorodnym materiale części przekracza wymóg graniczny określony w dokumencie GB/T 26572.

Utylizacja

To oznaczenie wskazuje, że tego urządzenia nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je odpowiedzialnemu recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych.

GWARANCJA

- * W momencie sprzedaży produktu do innego kraju istnieje pewne opóźnienie w okresie gwarancyjnym.
- * Udzielamy dwuletniej gwarancji na produkt, bez uwzględnienia dyszy, licząc od daty zakupu.
- * Udzielamy dwuletniej gwarancji na przewód ładujący, licząc od daty zakupu.

W okresie gwarancyjnym jesteśmy zobligowani do bezpłatnego sprawdzenia materiałów lub wykonania pod kątem wad i według naszego uznania, wymiany kompletnego urządzenia na nowe.

Niniejszą gwarancją nie objęto uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, normalnego zużycia, jak również wad mających znikomy wpływ na wartość lub działanie urządzenia. Lampka błyskowa jest uważana za część zużywalną urządzenia i dlatego nie jest objęta gwarancją.

Importer / Dystrybutor

Kamaks sp. z o.o.

Ul. Pokrzywno 4a

61-315 Poznań

Polska

www.shona.pl