

**OSTRZEŻENIE**


- ⚠ Przed użyciem termometru dokładnie zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
- ⚠ Ryzyko zadławienia: połknięcie przykrywki i baterii stanowi duże niebezpieczeństwo. Dzieci mogą używać termometru wyłącznie w obecności osób dorosłych.
- ⚠ Nie używaj termometru do pomiaru temperatury w uchu.
- ⚠ Niniejszy termometr przeznaczony jest wyłącznie do pomiarów temperatury ciała w ustach, pod pachą lub w odbycie.
- ⚠ Nie trzymaj termometru w wysokich temperaturach, ponieważ może wybuchnąć.
- ⚠ Uwaga: użycie kapturka na czujnik może spowodować, że wynik temperatury będzie różnił się o ok. 0.1°C od rzeczywistej temperatury ciała.
- ⚠ Zaleca się przeprowadzenie kontroli działania termometru co dwa lata.
- ⚠ Jeśli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

**PRZECZYTAJ UWAGNIE PRZED UŻYCIEM TERMOMETRU**

Niniejszy termometr elektroniczny gwarantuje szybki i dokładny pomiar temperatury ciała. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby poznać wszystkie funkcje termometru oraz zapewnić dokładne wyniki pomiaru przez długi czas. Niniejszy termometr wyprodukowany jest zgodnie z systemem EN12470-3, ASTM i spełnia wymagania norm: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2. Producent posiada certyfikaty ISO 13485:2012+AC:2012.

**ZAWARTOŚĆ**

Termometr, instrukcja obsługi, etui

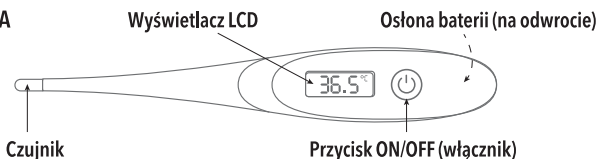**OPIS URZĄDZENIA**

Rysunek 1

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- ! Nie zginaj, ani nie rzucaj termometrem. Termometr nie jest odporny na wstrząsy.
- ! Nie gotuj czujnika w celu dezynfekcji.
- ! Nie wystawiaj termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- ! Nie rozkręcaj termometru. Aby wymienić baterie, przeczytaj punkt „Wymiana baterii”.
- ! Nie zostawiaj termometru w pobliżu mikrofalówek lub telefonów komórkowych, aby nie powodować zakłóceń elektromagnetycznych.

--- Prąd stały.

⚠ Urządzenie typu B.

⚠ Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją.

LOT Numer seryjny

Producent

Autoryzowany Przedstawiciel w Unii Europejskiej

**DANE TECHNICZNE**

Zakres: 32°C - 42,9°C

Dokładność: ±0.1°C w zakresie 35,5°C - 42°C, ±0.2°C poza tym zakresem

W temperaturze pokojowej ~25°C

Czas pomiaru: 60 sekund.

Wyświetlacz: Ciekłokrystaliczny

Pamięć: Przechowywanie ostatniego wyniku pomiaru

Bateria: 1 × 1.55V DC LR41/SR41/UCC392

Żywotność baterii: ok. 200 godzin pracy

Wymiary: 12,4 × 1,8 × 0,9 cm

Waga: ok. 10 gramów (z baterią)

Warunki użytkowania:

Temperatura: 10°C - 40°C

Wilgotność względna: 15-95% RH

Warunki przechowywania i transportu:

Temperatura: MIN -25°C MAX 55°C

Wilgotność względna: 15-95% RH

Wodoodporność: IP22

Klasyfikacja: Urządzenie typu B


**OBSŁUGA**

1. Naciśnij przycisk ON/OFF znajdujący się obok wyświetlacza LCD. Kiedy na ekranie pojawią się wszystkie elementy ekranu, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie wyświetli się ostatni zapisany wynik pomiaru. Po przeprowadzeniu autotestu, termometr przejdzie w tryb pomiaru, a na ekranie pojawi się symbol „Lo°C”. Jeśli temperatura otoczenia przekracza 32°C, zamiast symbolu „Lo°C” pojawi się zmierzona temperatura otoczenia.

2. Umieść termometr w wybranym miejscu pomiaru (usta, odbył lub pod pachą):


- a)  **pomiar w ustach:** umieść termometr pod językiem, w miejscu gdzie na rysunku 2 znajdują się symbole "V". Zamknij usta i dychaj równomiernie przez nos, aby wdechane i wydychane powietrze nie wpływało na wynik pomiaru. Zakres prawidłowych temperatur wynosi 35,7°C-37,3°C.
- b)  **pomiar w odbycie:** nasmaruj wazeliną srebrną końcówkę czujnika dla łatwiejszego pomiaru. Delikatnie wsuń czujnik w odbył na głębokość ok. 1 cm. Zakres prawidłowych temperatur wynosi 36,2°C-37,7°C.
- c)  **pomiar pod pachą:** wytrzyj pachę do sucha, umieść termometr pod pachą i przyciśnij termometr ramieniem do ciała. Z medycznego punktu widzenia pomiar pod pachą zawsze będzie niedokładny i nie powinien być stosowany jeśli potrzebne jest precyzyjny wynik pomiaru. Zakres prawidłowych temperatur wynosi 35,2°C-36,7°C.

Rysunek 2

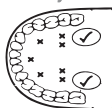

3. W trakcie przeprowadzania pomiaru miga symbol jednostki pomiarowej. Gdy symbol przestanie migać, włączy się sygnał dźwiękowy na ok.10 sekund. Jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru. Bez wyjątków należy utrzymać minimalny czas pomiaru (60 sekund) do chwili usłyszenia sygnału. Pomiar trwa także po sygnale, jeśli termometr nadal znajduje się w miejscu pomiaru. Po wyjściu termometru z miejsca pomiarowego wyświetlany wynik nie zmieni się. Między pomiarami należy zachować minimalny odstęp 30 sekund.
- Uwaga: Sygnał dźwiękowy zazwyczaj brzmi: „Bi-Bi-Bi-Bi”. Gdy wynik pomiaru przekroczy 37,8°C, sygnał będzie szybszy „Bi-Bi-Bi ---- Bi-Bi-Bi ---- Bi-Bi-Bi”.
- Uwaga: Jeśli wynik pomiaru jest niższy niż 32°C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „Lo°C”; jeśli wynik pomiaru jest wyższy niż 42,9°C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „Hi°C”.
- Uwaga: Jeśli pomiar wykonany będzie z wykorzystaniem osłonki na czujnik, wynik pomiaru może się różnić o ok.0,1°C od faktycznego.
4. Aby przedłużyć żywotność baterii, po zakończeniu pomiaru wyłącz termometr, naciskając przycisk ON/OFF. Termometr wyłączy się automatycznie po ok. 10 minutach, jeżeli nie będzie przez ten czas używany lub gdy nie zostanie wyłączony ręcznie.
5. Przechowuj termometr w etui ochronnym.

## PRZECZYTAJ UWAGI PRZED UŻYCIEM TERMOMETRU


1. Wymień baterię, gdy w prawym dolnym rogu pojawi się symbol: 
2. Przesuń osłonę baterii, jak pokazano na rys. 3.
3. Delikatnie wyciągnij plastikowy biały wkład z gniazdem baterii z obudowy termometru na ok. 1 cm (1/2") (rys. 4).
4. Użyj przedmiotu zakończonego czubkiem, jak długopis, aby wyjąć zużyty baterię. Zutylijuj baterię zgodnie z przepisami (Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej). Wymień baterię na nową 1,5V LR4. Sprawdź, czy bateria włożona jest zgodnie z polaryzacją (rys. 5).
5. Wsuń z powrotem plastikowy wkład do obudowy termometru i załóż osłonę.



Rysunek 3



Rysunek 4

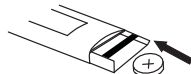

Rysunek 5

## UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pożyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się w/g zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

## GWARANCJA „OD DRZWI DO DRZWI”

- Gwarant zapewnienia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. Niniejsza gwarancja uprawnia nabywcę do skorzystania z gwarancji typu od drzwi do drzwi, która zakłada, że reklamowany sprzęt jest bezpłatnie odbierany od Nabywcy przez kuriera, bezpłatnie naprawiany oraz bezpłatnie dostarczany z powrotem w to samo miejsce.
- OKRES GWARANCJI: 24 miesiące na urządzenie.
- Części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie nie podlegają gwarancji.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- Aby skorzystać z gwarancji door to door, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji „od drzwi do drzwi”.
- W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć poniższą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia. Niniejsza Gwarancja nie zachowuje ważności, gdy model i/lub numer seryjny (jeśli dostępny) zostały zmienione, usunięte lub są nieczytelne.
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania; niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych; przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)
- Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
- Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

## KARTA GWARANCYJNA

Model: VITAMMY NANO 3 (GF-MT506)

Podpis i pieczętka sprzedawcy

Data zakupu: .....

.....

Dystrybutor / Distributed by:

INFOLINIA POMOCY I WSPARCIA TECHNICZNEGO: 887 11 00 66, e-mail: pomoc@novamed.pl

Novamed.pl Sp. z o.o. S.K.A. ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź POLAND



Hangzhou Universal Electronic Co., Ltd.  
298 Yunxi Road, Cangqian Street Yuhang  
District Hangzhou 311121 Zhejiang China



Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro  
Heerdter Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Germany



Produkt zgodny  
z wymogami MDD 93/42/EEC