

smufa

MIKROPRĄDOWY MASAŻER INDUKCYJNY DO APLIKACJI KOSMETYKÓW NA TWARZ

Model: MC1300-CE

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

WPROWADZENIE

Magnetyczny masażer twarzy wprowadza składniki odżywcze produktów do pielęgnacji skóry do dolnej warstwy skóry na zasadzie magnetycznego wprowadzania energii kinetycznej i mikrowibracji o wysokiej częstotliwości, osiągając w ten sposób wysoką wydajność wchłaniania, a tym samym osiągając efekt piękna twarzy.


Produkt ma kompaktową konstrukcję i jest łatwy do przenoszenia. Wykorzystuje baterię AAA, która jest bezpieczna i przyjazna dla środowiska.

Profesjonalna głowica masująca produktu może być stosowana pod każdym kątem skóry. Wykorzystuje mikrowibracje o wysokiej częstotliwości, indukcyjną magnetyczną, odwrotną magnetyczną energię kinetyczną i inne technologie upiększające. Może głęboko penetrować i pogłębiać skórę twarzy, zmniejszać drobne zmarszczki, przywracać elastyczność skóry i kształtować kontury twarzy, opóźniając starzenie się skóry itp.

OSTRZEŻENIA

- △ Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- △ W przypadku złego samopoczucia podczas stosowania produktu lub nieprawidłowego wyglądu skóry należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- △ Nie stosować na skaleczoną skórę.
- △ Aby uniknąć nieprawidłowego działania, nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować tego produktu.
- △ Produkt nie jest wodoodporny, dlatego nie należy wkładać go do wody.
- △ Należy zapobiegać upuszczeniu lub uderzeniu produktu, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania.
- △ Produkt należy umieścić w suchym i wentylowanym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego i żrących substancji chemicznych.
- △ Przed użyciem tego produktu należy użyć odpowiedniej ilości produktów do pielęgnacji skóry. Jeśli produkty do pielęgnacji skóry są używane nadmiernie, mogą nie zostać całkowicie wchłonięte, co powoduje nadmierne zużycie kosmetyku, a jednocześnie możliwość przeniknięcia resztek płynu do produktu, co pogarsza jego żywotność. Po użyciu należy wytrzeć go ściereczką do czyszczenia.
- △ Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy pozwalać dzieciom na kontakt z tym produktem.
- △ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię i przechowywać produkt.
- △ Podczas utylizacji tego produktu baterię należy wyjąć i zutylizować w centrum recyklingu wyznaczonym przez rząd w celu ochrony środowiska.

OPIS URZĄDZENIA

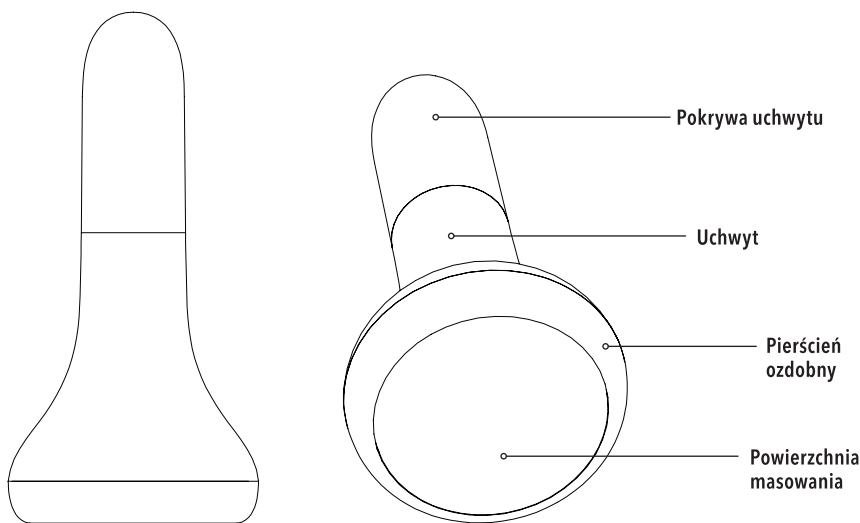

Napięcie robocze:	1,5V/100mA
Częstotliwość wibracji:	8000 Hz
Pojemność baterii:	1500mAh

PRZED UŻYCIEM

- △ Przygotuj produkty do pielęgnacji skóry, takie jak esencje, maseczki lub kremy.
- △ Zmyj makijaż zgodnie z codzienną rutyną.
- △ Oczyszcz głowicę masującą wilgotnym wacikiem

OBSŁUGA URZĄDZENIA

OCZYSZCZANIE I ROZJAŚNIANIE SKÓRY

1. Splukać twarz wodą i osuszyć. Nałóż na twarz kapsułkę detoksykującą lub tonik.
2. Wyjmij masażer, przytrzymaj i powoli przesuwaj, aby oczyścić twarz ruchami od wewnątrz na zewnątrz i od dołu do góry, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

△ Zaleca się oczyszczanie i rozjaśnianie skóry raz na 2-3 dni.

ODŻYWIANIE SKÓRY

1. Nałóż równomiernie kosmetyk odżywczy na twarz.
2. Wyjmij masażer, przytrzymaj, przesuwaj głowicę masującą od dołu do góry lub po okręgu. Przyspiesz wchłanianie za pomocą metody punktowego wciskania i używaj jej za każdym razem przez 3~5 minut.

- △ Jeżeli po zabiegu na twarzy pozostaną resztki składników odżywczych, można je zetrzeć lub zmyć.
- △ Można stosować codziennie z produktami do pielęgnacji skóry.


UJĘDRNIANIE SKÓRY

1. Nałóż krem ujędrniający równomiernie na twarz.
2. Wyjmij masażer, przytrzymaj i powoli unosz skórę twarzy od wewnątrz na zewnątrz i od dołu do góry.

- △ Jeżeli po zabiegu na twarzy pozostaną resztki składników odżywczych, można je zetrzeć lub zmyć.
- △ Podczas użytkowania występuje uczucie działania mikroprądów na powierzchni skóry. Wynika to z zasady działania urządzenia i jest zjawiskiem całkowicie normalnym.

INSTALOWANIE BATERII

Przytrzymaj uchwyt ręką i odkręć pokrywę uchwyty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zainstaluj 1 sztukę baterii (bateria AAA) zgodnie z orientacją biegunów, na koniec obróć pokrywę uchwyty zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamocować.

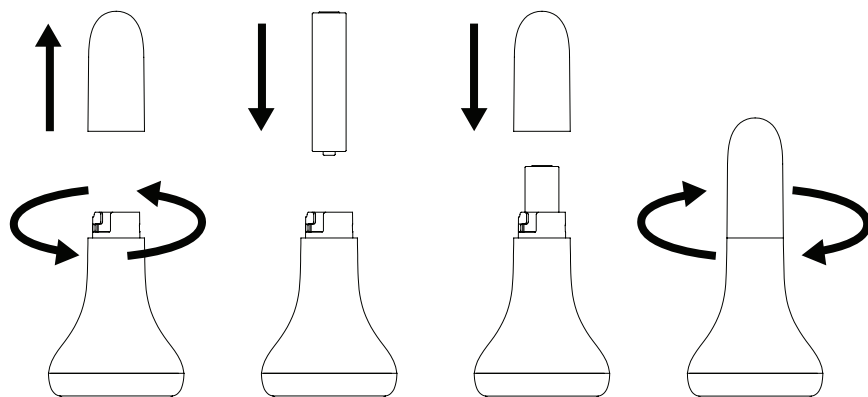











CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- △ Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
- △ Produktu nie należy splukiwać bezpośrednio wodą. Przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- △ Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni nie należy używać chemicznych, stalowych, drewnianych lub odpornych na zużycie środków czyszczących.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Producent		Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE
	Prąd stały		
	Data produkcji		Stosować się do dyrektywy WEEE 2012/19/UE: Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Numer partii		
	Przeczytaj instrukcję		Stopień ochrony IP
	Importer		Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/WE Unii Europejskiej (Restriction of Hazardous Substances).


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- Masażer VITAMMY SMUFA (MC1300-CE)
- Instrukcja używania

GWARANCJA

URZĄDZENIE	VITAMMY SMUFA (MC1300-CE)
GWARANT	NOVAMED.PL S.A. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
WSPARCIE TECHNICZNE	Infolinia - tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
GWARANCJA	Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie objętym niniejszą gwarancją gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w terminie do 14 dni. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.
TYP GWARANCJI	Gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu Technicznego, ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź, a następnie naprawiony lub wymieniony i dostarczony bezpłatnie Kupującemu.
OKRES GWARANCJI	24 miesiące na urządzenie
BIEG OKRESU GWARANCJI	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej
OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI	Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
	Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: <ul style="list-style-type: none">niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowanianiewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnychingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnychprzyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)
	Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
	Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

 Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewni, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Niewłaściwa utylizacja może powodować zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi typu miedź.

Zawsze należy utylizować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odstępstwo od tej zasady może negatywnie wpłynąć na środowisko lub zdrowie człowieka z powodu zawartości w baterii metali.

W wyniku spożywania roślin pochodzących z upraw prowadzonych na zanieczyszczonej glebie lub picia zanieczyszczonej wody, metale ciężkie mogą dostać się do ludzkiego ciała. Ich kumulacja w organizmie, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Obecność cewek elektromagnetycznych może powodować promieniowanie elektromagnetyczne.

INFORMACJE KONTAKTOWE

 **Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.**

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

NOVAMEDPL

 **NOVAMED.PL S.A.**

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, POLAND

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66



Wyprodukowano w Chinach